

Katalog produktów

Funkcjonalne i innowacyjne urządzenia oraz indywidualne rozwiązania dla wszystkich w sektorze opieki



 ergolet®



„

Luna

najlepszy przykład innowacyjnego,

***Skandynawskiego
designu***





Podnośnik
podwieszany

Luna

i prowadnice sufitowe



Stosowane na całym świecie

Stosowane w szpitalach, domach opieki i domach prywatnych. Sufitowe rozwiązania Ergolet rewolucjonizują opiekę zdrowotną osób starszych i niepełnosprawnych.



Dostęp do każdego miejsca w pokoju

Nasze sufitowe systemy podnoszenia działają z lekkim podnośnikiem Luna, który jest łatwy w instalacji oraz oferuje pokrycie całego pomieszczenia, nawet przy nierównych ścianach.



Wychodzimy naprzeciw potrzebom

Podnośnik Luna i innowacyjny system prowadnic jest połączeniem funkcjonalności i estetyki, co czyni go idealnym wyborem, który potrafi sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjenta w coraz szybciej rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej.

**Bezpieczeństwo
i zaufanie**

Jakość
i innowacyjność

**Design
i funkcjonalność**



Modele Luny

Stale i przenośne montowanie w jednym i tym samym podnośniku, co jest prawdziwie unikalną cechą. Zmiana trybu Luny z przenośnego w stały i odwrotnie, może być wykonane w przeciągu kilku sekund, poprzez zdjęcie i odwrócenie urządzenia do szyny, bez użycia narzędzi.



Tryb stały

200 lub 275 kg
udźwigu

**Transfer z funkcją
przewieszania**
za pomocą dwóch
podnośników Luna



Tryb przenośny

200 lub 275 kg
udźwigu



**Transfer z funkcją
przewieszania**
za pomocą pasa





Zalety

Najlepszy w swojej klasie design oraz funkcjonalność. Udźwig 200 lub 275 kg. Opatentowany system haków do podwieszek ERGO, które są łatwe i bezpieczne w użyciu. Ładowanie za pomocą pilota i ładowarki ściiennej/stołowej oraz funkcja opuszczania awaryjnego.





Wieszaki
-różne modele
dostosowane do
różnych potrzeb



Ergolet Luna – elegancja i siła



Design i funkcjonalność

Najlepszy w swojej klasie, nowoczesny i prosty design, zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią. Udźwig do 275 kg. Łatwe ładowanie.





Różnorodność


Opatentowany przez firmę Ergolet system wieszaków, łatwy i bezpieczny w użytkowaniu, o rozpiętości spełniające potrzeby standardowe, **a także** dzieci i osób z nadwagą.





Przykłady montażu: Szyna ścienna "E" i prowadnice

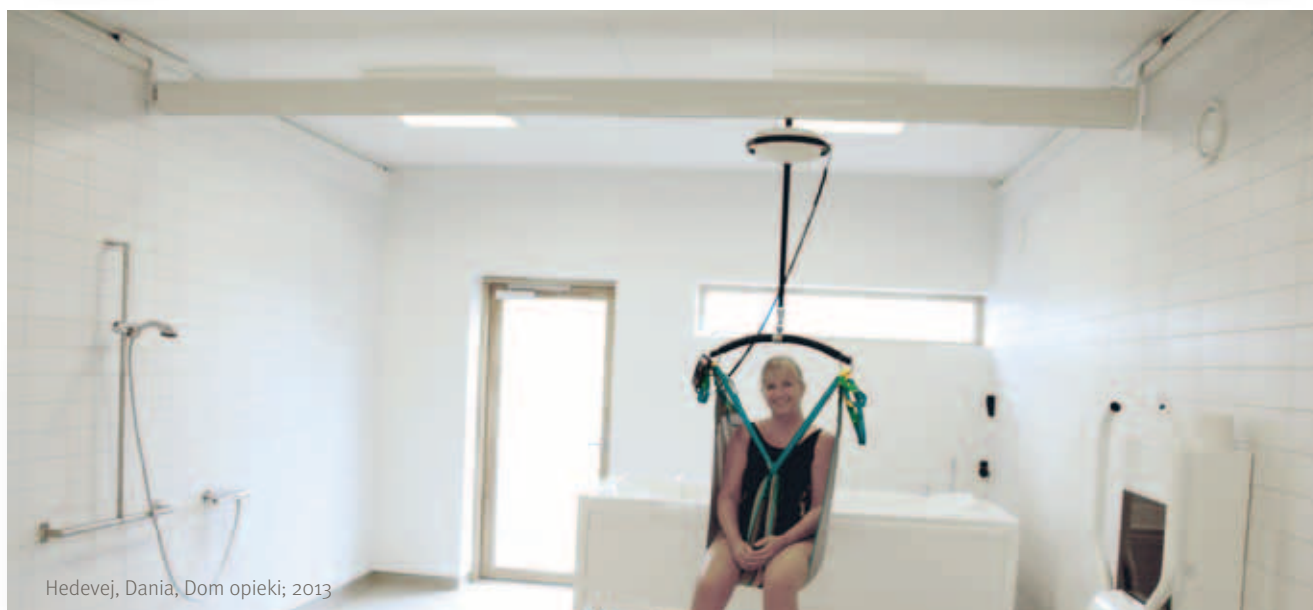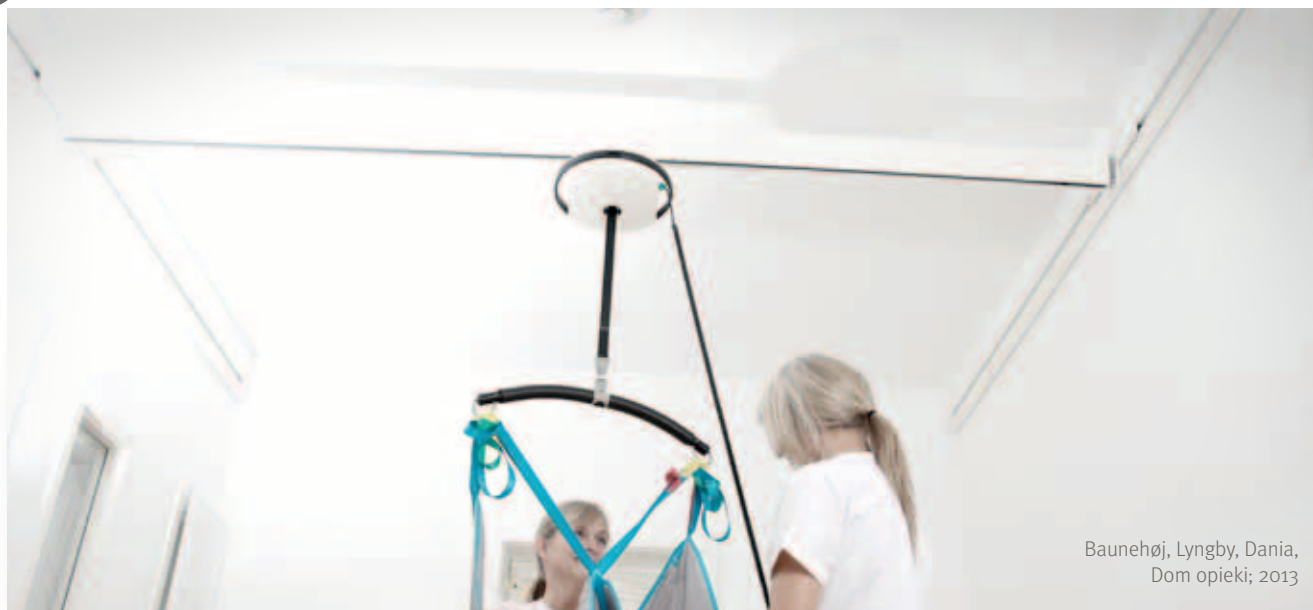

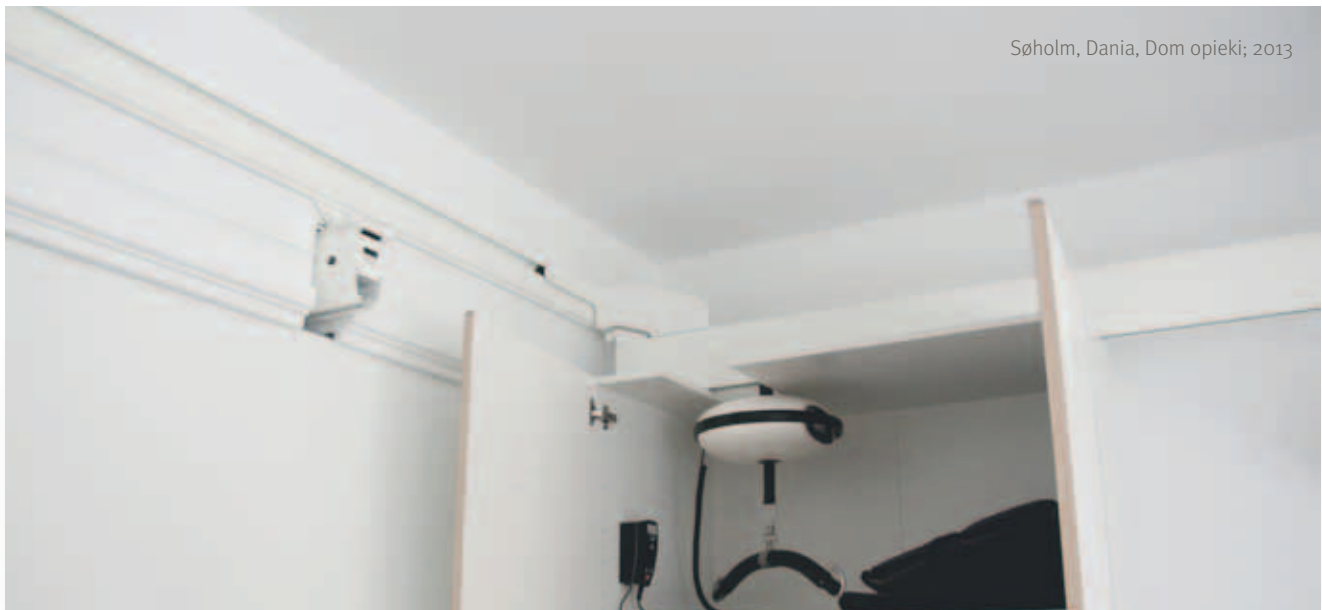

Søholm, Dania, Dom opieki; 2013



Bakkegården, Dania, Dom opieki; 2013



Søholm, Dania, Dom opieki; 2013



Szeroki wybór prowadnic sufitowych

Ergolet oferuje szeroką gamę systemów sufitowych, szyny proste i zakrzywione, obrotnice i zmieniające toru, które mogą być łatwo zainstalowane w różnych konfiguracjach, po to, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie do indywidualnej sytuacji.

Unikalne szyny montowane na ścianach

Unikalne szyny ścienne E i C dopasowują się dyskretnie do środowiska opieki i zmieniają sposób pracy opiekuna. Jest to elegancka alternatywa dla konwencjonalnych wsporników ściennych i sufitowych.





Luna IPx4

Podnośnik sufitowy, który może być wykorzystywany w łazienkach i pod prysznicem.

Podnośnik sufitowy Luna IPx4 może być używany do przenoszenia z łóżka czy krzesła/wózka lub z krzesła na toaletę itp. w instytucjach takich jak domy opieki, szpitale, ośrodki opieki lub w domowej opiece.

Podnośnik Luna IPx4 jest dostępny w trybie stałym (mocowanym do szyny) i przenośnym (na pasie). Istnieje natomiast możliwość zamiany, czyli odwrócenia Luni z modelu stałego na przenośny i odwrotnie.

Nowe funkcje:

Podnośnik Luna IPx4 został ulepszony, o możliwość użytku łazienkowego bez obaw o ochłapanie podnośnika. Ergonomiczny pilot posiada rodzaj ochrony IPx4 a także IPx7, co znaczy że może być pokropiony (IPx4) lub całkowicie zamoczony w wodzie (IPx7). Użytkownik może także dokonać wyboru modelu pomiędzy pilotem z kablem wychodzącym z góry albo z dołu.

Oprócz standardowego awaryjnego opuszczania na pilocie, podnośnik został dodatkowo wyposażony w ręczny system awaryjnego opuszczania. System znajduje się na Lunie i łatwo go obsłużyć w przypadku całkowitej awarii podnośnika. Przejrzysta instrukcja obsługi znajduje się na ładowarce.

Dodatkowo mechanizm złącza kabla pilota i podnośnika jest ulepszony i niezawodny. Na Lunie IPx4 zostało dodane dodatkowe wyjście, gdzie można podłączyć elektrycznie regulowany wieszak.

Zalety

Dobrze zaprojektowany i funkcjonalny.

Maksymalny udźwieg do 200 kg i 275 kg.

Opatentowane haki na podwieszakach, bezpieczne i łatwe w użyciu.

Funkcja pracy w trybie stałym lub przenośnym (wymienne) ładowanie akumulatora za pomocą ergonomicznego pilota i ładowarki ściennej.

Elektryczne i ręczne awaryjne opuszczanie.

Stopień ochrony urządzenia IPx4.





Mocowanie poziome w trybie zamontowania na stałe lub przenośnym bez użycia narzędzi.



Nowe i ulepszone złącze podnośnika Luna IPx4 i kabla pilota.



Pilot IPx7 może być całkowicie zamoczony w wodzie.



Użytkownik może także dokonać wyboru modelu pomiędzy pilotem z kablem wychodzącym z góry albo z dołu.



Elektryczne opuszczanie awaryjne na pilocie i podnośniku oraz nowe, ręczne opuszczanie awaryjne na podnośniku z instrukcją na boku ładowarki.



Mocowanie podwieszki:
Minimalny nacisk skierowany w dół zamyka hak podwieszki; w celu otwarcia haka podwieszki pociągnąć w górę.

Model	Numer artykułu
LunaIPx4 / 200 kg przenośny (pas) - biały / szary	015-03020 / 015-03021
LunaIPx4 / 275 kg przenośny (pas) - biały / szary	015-03022 / 015-03023
LunaIPx4 / 200 kg zamontowany (na szynie) - biały / szary	015-03026 / 015-03027
LunaIPx4 / 275 kg zamontowany (na szynie) - biały / szary	015-03028 / 015-03039
LunaIPx4 / 200 kg zamontowany (na szynie) 2 wyjścia - biały / szary	015-03032 / 015-03031
LunaIPx4 / 275 kg zamontowany (na szynie) 2 wyjścia - biały / szary	015-03034 / 015-03033
LunaIPx4 / 200 kg z funkcją przewieszania - biały / szary	015-03035 / 015-03036
LunaIPx4 / 275 kg z funkcją przewieszania - biały / szary	015-03037 / 015-03037
Akcesoria	Numer artykułu
Pilot IPx4 z kablem wychodzącym z góry*	015-03105
Pilot IPx4 z kablem wychodzącym z dołu*	015-03101
Pilot IPx7	015-03109
2,3,4 punktowe wieszaki	skontaktuj się z firmą Ergolet
Szeroki wybór podwieszek	skontaktuj się z firmą Ergolet
Waga	skontaktuj się z firmą Ergolet
Przedłużenie pasa Luny w różnych długościach	skontaktuj się z firmą Ergolet

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Lista akcesoriów może zostać zmieniona.

Maksymalny udźwóg	200 kg / 275 kg
Długość pasa unoszącego	2200 mm
Waga	6,7 kg bez wieszaka
Wymiary	320 x 130 mm
Akumulator	36 V, kwasowo-ołowiowy
Ładowanie	100 - 240 V, 0,5 A
Konstrukcja	Aluminium
Obudowa	Odporna na uderzenia, profilowany ABS
Hałas	Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania bez obciążenia wynosi 48 dB (A) Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania z maksymalnym obciążeniem wynosi 52 dB (A)
Czas ładowania	około 4,5 - 5 godzin przy całkowitym wyczerpaniu baterii
Prędkość opuszczania	44 mm / sek z obciążeniem 89 kg
Prędkość unoszenia	30 mm / sek z obciążeniem 89 kg
Ilość wyciągów na jednym ładowaniu	50 podniesień na wys. 0,5 m przy obciążeniu 100 kg
Stropień ochrony zewnętrznej urządzenia	IPx4

- Płynny start i zatrzymanie
- Awaryjne opuszczanie elektryczne i ręczne
- Elektryczny wyłącznik awaryjny
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii (LED)
- Wskaźniki ładowania
- Wskaźniki zasilania
- Ochrona przed przeciążeniem
- System hamowania awaryjnego



Wszystkie testy stopni ochrony urządzeń są przeprowadzane przez TÜV.

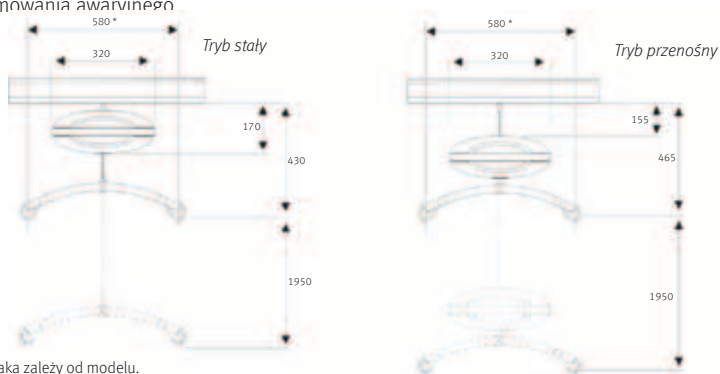

* Wielkość wieszaka zależy od modelu.

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach.

Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



MDD93/42/EEC
Class I

Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608

E-mail: daf@ergolet.pl

www.ergolet.com





Pilot i ładowarka do podnośnika Luna

Złącze o rodzaju ochrony IPx7:

Bezpieczny i
niezawodny
mechanizm
do setowania
podnośnika
sufitowego Luna.



- Pilot do podnośnika Luna ma ergonomiczny kształt i wyjątkową funkcjonalność.
- Ładowarka do Luni może być zamontowana na każdej ścianie. Zapewnia to ciągłą i stabilną stację ładowania.
- Ładowarka do Luni może być zamontowana na innych urządzeniach Ergolet jak wózek Luna czy Mobile Flex.

Stała i stabilna
stacja ładowania



Zeskanuj kod QR
i zobacz wideo,
kartę produktu,
instrukcję i inne
materiały.



ergolet®

Piloty -modele

- Piloty Luna są dostępne w klasie ochrony IPx4 i IPx7. IPx4 toleruje ochłapanie, a IPx7 całkowite zanurzenie w wodzie.
- Piloty IPx4 mają opcjonalne wyjście kabla z góry lub z dołu. Pilot IPx7 posiada tylko dolne wyjście kabla.

Model (ochrona): IPx4
Wyjście kabla: DOLNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03101)
Długość kabla: 1620mm (nr 015-03102)
Długość kabla: 1900mm (nr 015-03103)

Toleruje: Ochłapanie wodą

Model (ochrona): IPx7
Wyjście kabla: DOLNE

Długość kabla: 1320mm (015-03109)

Toleruje: Całkowite zanurzenie w wodzie

Model (ochrona): IPx4 (2 kanały)
Wyjście kabla: DOLNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03106)
Długość kabla: 1620mm (nr 015-03107)
Długość kabla: 1900mm (nr 015-03108)

Toleruje: Ochłapanie wodą

Model (ochrona): IPx4
Wyjście kabla: GÓRNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03105)

Toleruje: Ochłapanie wodą

Model (ochrona): IPx4 (2 kanały)
Wyjście kabla: GÓRNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03110)
Długość kabla: 1620mm (nr 015-03111)
Długość kabla: 1900mm (nr 015-03112)

Toleruje: Ochłapanie wodą

2 kanały:

Dodatkowe przyciski na pilocie dla dodatkowych urządzeń, takich jak Ergo Trainer albo elektryczny wieszak.

Wszystkie testy stopni ochrony urządzeń są przeprowadzane przez TÜV.



MDD93/42/EEC
Class I

Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608

E-mail: daf@ergolet.pl

www.ergolet.com

Ergolet Polska sp. z o.o. • Lub ska 17 • 68 -320 Jasień

Ergolet • Taarnborgvej 12C • 4220 Korsoer • Denmark





Wózek Luna

Wózek do przewozu podnośnika Luna

Główne zastosowanie

Opieka domowa
Domy opieki



Używanie podnośnika sufitowego Luna w module przenośnym pozwala na nieporównywalną z niczym elastyczność w sytuacjach transportowania pacjenta, zarówno w domach opieki jak i w środowisku opieki domowej.

Wózek Luna jest szybkim, wydajnym oraz praktycznym środkiem transportowania przenośnej kasety z jednego pomieszczenia do drugiego. Przy użyciu Wózka Luna, opiekun nie musi przenosić kasety w ręku z pomieszczenia do pomieszczenia. Gładko jeżdżący Wózek Luna wykonuje pracę za opiekuna.

Wózek Luna zapewnia opiekunowi pełne przenośne rozwiązanie: pomost, który bezpiecznie utrzymuje wyciąg sufitowy Luna w miejscu, wygodne ładowanie na stacji bazowej, kieszeń na pas Luny, oraz przydatny futerał do przenoszenia podwieszek i innych akcesoriów. Krótko mówiąc, jest to praktyczna pomoc do perfekcyjnego transportu urządzenia.

Poręczny chwytak w 3 długościach do zdejmowania i mocowania kasety Luna (akcesoria).


Zalety

Lekki, wytrzymały wózek, który z łatwością się prowadzi.
Możliwość ładowania akumulatora na stacji bazowej.
Zawiera futerał na podwieszkę.
Wygodna kieszeń na pas Luny.





Kieszonka na pas Luny.

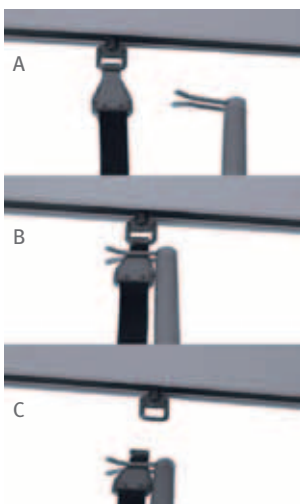

Łatwe zdejmowanie kasety za pomocą chwytaka (A, B, C). Chwytnik służy do zdejmowania i mocowania kasety Luna: 3 długości.



Wygodny futerał na akcesoria



Stacja wyposażona w ładowarkę.


GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Wózek do transportu przenośnej kasety Luna między pomieszczeniami
- Specjalnie zaprojektowane gniazdo (siedzisko) pod przenośną kasę
- Chwytnik, służący do zakładania i zdejmowania kasety (akcesoria)
- Stacja ładowania
- Wygodny futerał na podwieszkę lub instrukcję obsługi
- Kieszonka na pas Luny

Model	Numer produktu
Wózek Luna z dwupunktowym wieszakiem	015-02017
Akcesoria	Numer produktu
Chwytnik 600 mm	
Chwytnik 1000 mm	
Chwytnik 1500 mm	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość	950 mm
Długość	370 mm
Szerokość	492 mm
Ciężar	10,6kg
Materiał	Stal malowana proszkowo
Ładowanie	100-240V, 0,5A

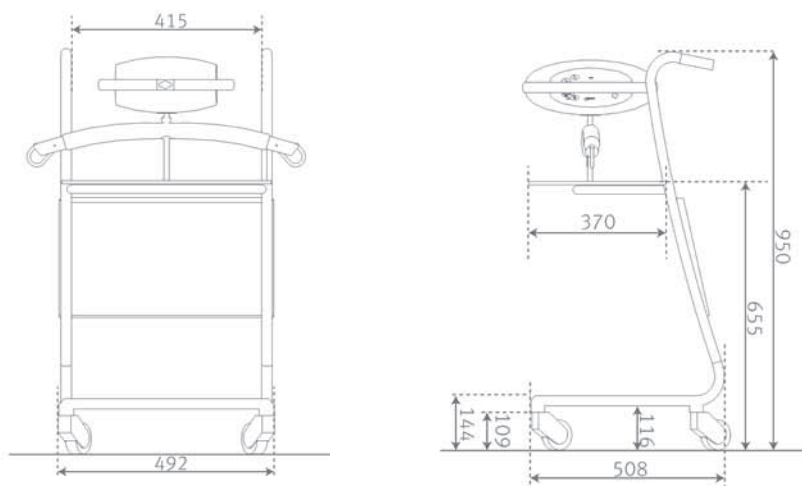

Rysunki oraz specyfikacja techniczna dotyczą kasety Luna z dwupunktowym wieszakiem.

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach.

Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



date 31.03.2014 - ver. 8

Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608
E-mail: daf@ergolet.pl
www.ergolet.com



Ergolet • Taarnborgvej 12C • 4220 Korsoer • Denmark

Ergolet Polska sp. z o.o. • Lubuska 17 • 68 - 320 Jasień



Mobile Flex

2- kolumnowa rama

Rama jezdna o regulowanej wysokości i szerokości

Główne zastosowanie

Domy opieki
Szpitale
Opieka domowa

Urządzenie przeznaczone dla osób, które wymagają natychmiastowej pomocy podczas podnoszenia i przemieszczania. Idealne jako tymczasowe rozwiązanie, łatwe w obsłudze i prostej regulacji wyjątkowo nadające się do indywidualnych potrzeb. Urządzenie bardzo łatwe w montażu, które nie wymaga dodatkowych narzędzi podczas regulacji wysokości i szerokości dla zapewnienia sobie indywidualnego i komfortowego rozwiązania.

Dopasowanie odpowiedniej wysokości urządzenia zajmuje tylko kilka sekund zapewniając natychmiastową gotowość do użycia. Teleskopowo rozsuwane prowadnice dają gwarancję i możliwość zastosowania urządzenia do większości pomieszczeń i zapewniają rozwiązanie problemów związanych z podnoszeniem i przemieszczaniem w każdej sytuacji.

Rama jezdna firmy Ergolet w połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem podnośnika podwieszanego Luna jest prostym i niezwykle funkcjonalnym systemem podnoszenia, stanowiącym idealny wybór zarówno dla prywatnych użytkowników jak i też instytucjonalnych odbiorców.

Rama jezdna zapewnia maksymalny udźwig do 275 kg wykorzystując w pełni możliwości i zakres pracy podnośnika podwieszanego Luna.

Zalety

Udźwig do 275kg
Regulacja wysokości i szerokości ramy
Rama umieszczona na podstawie jezdnej
Łatwy montaż i szybkie dostosowanie do warunków pomieszczenia
Pełne wykorzystanie parametrów i możliwości podnośnika podwieszanego Luna
Tylko 1150 mm głębokości w podstawie ramy
Bajonet do montowania podnośnika Luna na stałe w zestawie

Akcesoria

Wózek do montowania podnośnika Luny przenośnie






Łatwa regulacja bez użycia narzędzi



Podwójne koła z hamulcem. Łatwe zablokowanie poprzez lekkie naciśnięcie pedału hamulca



Podnośnik podwieszany Luna zamontowany na ramie Mobile Flex

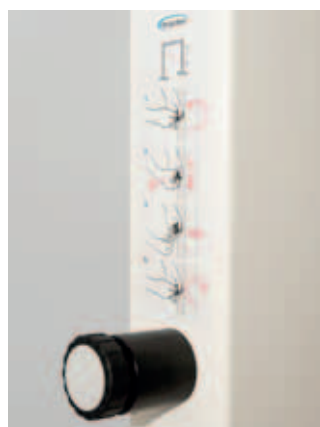

Łatwa regulacja wysokości (mechanizm sprężyny gazowej) Przyjazna, krótka instrukcja regulacji umieszczona na ramie.


GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
- Dopasowanie szerokości do warunków lokalowych
- Łatwy montaż
- Łatwa i szybka regulacja wysokości i szerokości
- Łatwe w utrzymaniu czystości

Model	Numer produktu
Mobile Flex / 3000	016-01147
Mobile Flex / 4000	016-01148
Akcesoria	
Wózek do montowania podnośnika Luni przenośnie	016-02021

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Mobile Flex / 3000	Mobile Flex / 4000
Udźwig	275 kg	275 kg
a	1773,5 mm	1773,5 mm
b	2160 mm	3160 mm
c	3160 mm	4160 mm
d	122 mm	122 mm
e	1150 mm	1150 mm
f	1891 mm	1891 mm
g	2541 mm	2541 mm

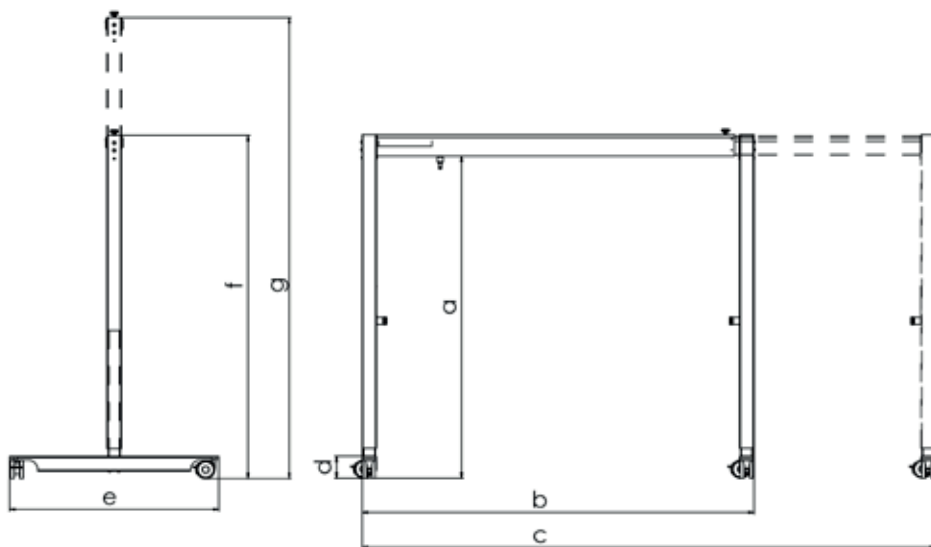

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608
E-mail: daf@ergolet.pl
www.ergolet.com





Mobile Flex

4-kolumnowa rama

Regulowany, wolnostojący system suwnicowy

Główne zastosowanie

Domy opieki
Szpitale
Opieka domowa

Wolnostojący system suwnicowy od firmy Ergolet.

Mobile Flex jest elastycznym systemem, który od razu po montażu można zacząć używać. System Mobile Flex łatwo się montuje oraz nie wymaga żadnych zmian w pokoju.

Ze względu na wiele opcji regulacji, Mobile Flex spełnia wszystkie potrzeby w podnoszeniu i przenoszeniu osób.

W połączeniu z podnośnikiem sufitowym Luna, Mobile Flex staje się łatwym i funkcjonalnym systemem podnośnikowym.

Zalety

- Maksymalny udźwóg do 275 kg
- Wykorzystuje pełną zdolność udźwigu podnośnika sufitowego Luna
- Dostępny w kilku wariantach
- Maksymalna powierzchnia pokrycia 16m² (4x4m)
- W pełni regulowany system 4-kolumnowy
- Mocowanie Luni na szynie
- Może być używany na zewnątrz

Akcesoria

Multi przełącznik





Łatwa regulacja bez użycia narzędzi

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Praktyczna konstrukcja i prosta funkcjonalność
- System obejmujący pokój
- Łatwość w czyszczeniu

Model	Numer produktu
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x3 metry	016-01220
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x4 metry	016-01221
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x3 metry	016-01222
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x4 metry	016-01223



Łatwa regulacja wysokości (mechanizm sprężyny gazowej). Prosta instrukcja znajduje się nad uchwytem.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalny udźwóg 275 kg

	3x3 (szyna x suwnica)	3x4 (szyna x suwnica)	4x3 (szyna x suwnica)	4x4 (szyna x suwnica)
a	1891 mm	1891 mm	1891 mm	1891 mm
b	2160 mm	2160 mm	3160 mm	3160 mm
c	3160 mm	3160 mm	4160 mm	4160 mm
d	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
e	2330 mm	3330 mm	2330 mm	3330 mm
f	3330 mm	4330 mm	3330 mm	4330 mm



Podnośnik sufitowy Luna zamontowany na urządzeniu Mobile Flex.

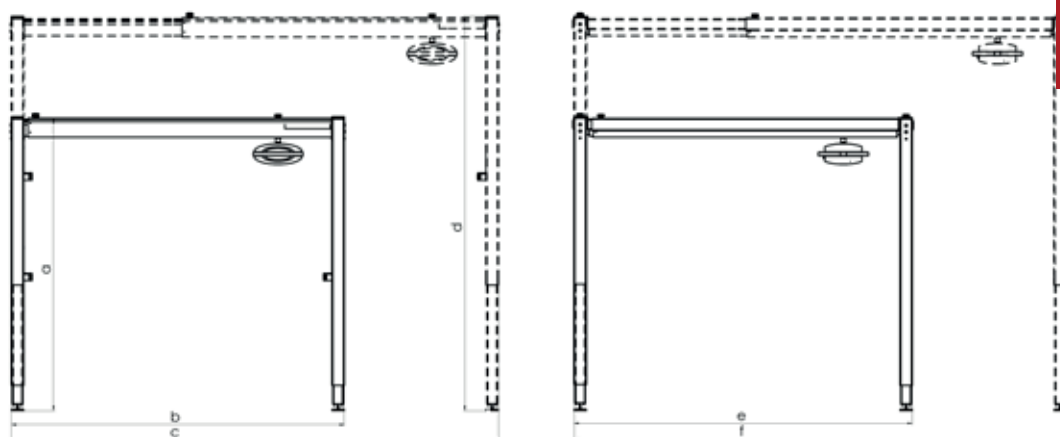

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608
E-mail: daf@ergolet.pl
www.ergolet.com





Ergo Trainer

- urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu

Znaczące postępy w rehabilitacji.

Poprzez ćwiczenia z odciążeniem wagi, pacjent jest częściowo uwalniany od swojej masy ciała, umożliwiając rozpoczęcie procesu rehabilitacji we wczesnej fazie, bez ryzyka wysiłku fizycznego. Zwiększona mobilność oraz poczucie bezpieczeństwa i pewności jest motywującym czynnikiem dla pacjenta i sprawia, że proces rehabilitacyjny staje się bardziej efektywny.



Rehabilitacja z odciążeniem wagi

Liniowy system zapewnia pacjentowi równe wsparcie masy ciała poprzez całą sesję rehabilitacyjną. Zatwierdzony dla pacjentów ważących do 200 kg, Ergo Trainer może odciążyć do 85 kg wagi pacjenta, spełniając tym samym wymagania użytkowników. Statystyki z Centrum Rehabilitacji i Neurologii w Danii pokazują, że ćwiczenia z odciążeniem zmniejszają a czasami eliminują potrzebę używania przez pacjenta chodzików czy kul inwalidzkich.



Przyjazny dla użytkownika

Montowanie uprząży podwieszki jest szybkie i łatwe. W ciągu pięciu minut pacjent jest gotowy do rozpoczęcia ćwiczeń. Aby używać Ergo Trainer, wymagana jest tylko krótka prezentacja. Regulacja systemu odciążania w łatwy sposób odbywa się za pomocą pilota.



Bezpieczeństwo

Automatyczny pneumatyczny hamulec zapobiega ryzyku poważnych upadków pacjentów. Ponadto, system bezpieczeństwa eliminuje ewentualne kontuzje terapeutów lub pracowników opieki, które mogą wystąpić podczas zapobiegania upadkom pacjentów. Kiedy bezpieczeństwo pacjentów jest zapewnione, terapeuci są w stanie wprowadzać bardziej efektywny i wymagający program ćwiczeń, który wspiera pacjentów i dodaje im pewności siebie.



Powtarzanie ruchów

Jeśli urządzenie jest użytkowane w połączeniu z bieżnią, pacjenci z osłabioną zdolnością chodzenia mogą ćwiczyć poprawny sposób chodzenia. Udokumentowane rezultaty pokazują, że ćwiczenia progresywne i powtarzanie ruchów w połączeniu z kontrolowaną prędkością bieżni, są kluczowym czynnikiem do udanej rehabilitacji.



Swoboda ruchu

Używając Ergo Trainer, ręce pacjentów są wolne, więc użytkownicy, którzy są w stanie poruszać rękoma, mogą ćwiczyć naturalny sposób chodzenia.



Montaż Ergo Trainera zajmuje od 3 do 5 godzin.



Ergo Trainer- bezpieczne i efektywne urządzenie rehabilitacyjne

// *“Bez systemu odciążeniowego trudno jest rehabilitować pacjentów z ograniczoną możliwością chodzenia, ponieważ strach przed upadkiem uniemożliwia efektywny i ciągły proces rehabilitacji.”*

-Jørgen Jørgensen, Centrum Rehabilitacji i Neurologii w Kopenhadze



Wieszaki

Wieszaki do podnośników

Główne zastosowanie

Opieka domowa
Domy opieki
Szpitale

Szeroki wybór wieszaków w różnych rozmiarach oraz modelach do różnych sytuacji transportowych. Wszystkie wieszaki firmy Ergolet są wyposażone w opatentowany system haków podwieszek.

Dwupunktowy wieszak najlepiej nadaje się do transportowania standardowego, w sytuacji gdy klient jest normalnej postury. Dostępny jest w trzech szerokościach.

W sytuacjach gdy klient jest większej postury, bardziej odpowiedni jest unikalny trzypunktowy wieszak, w kształcie litery V, który zwiększa odległość między pasami na ramiona a pasami na nogi, otwierając jednocześnie podwieszkę dla bardziej wygodnego podnoszenia. Również klienci o normalnej posturze mogą skorzystać na zaletach wspornikowych trzypunktowego wieszaka.

Transportowanie klientów bariatrycznych wymaga użycia czteropunktowego wieszaka, który w połączeniu z odpowiednim modelem i rozmiarem podwieszki, zapewnia im odpowiednie wsparcie oraz komfort.

Zalety

Szeroki zakres dla ogólnych oraz specjalnych zastosowań.
Łatwo wymienialne, w celu wielokrotnego użycia.
Opatentowane haki podwieszek.
Do użytku zarówno z podnośnikami podłogowymi jak i sufitowymi.





Dwupunktowy wieszak do przy-mocowania na podnośniku sufitowym Luna



Trzypunktowy wieszak zamontowany na podnośniku podłogowym Solar.



Czteropunktowy wieszak zamontowany na Lunie.



Wieszak z mocowaniem bagnetowym na Lunie. Sprężynowy mechanizm zatraskowy. W celu zamontowania i zdemontowania: wcisnąć. Przekręcić. Zwolnić.


GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Standardowe oraz bariatryczne sytuacje podnośnikowe
- Zróżnicowana elastyczność
- Opatentowany system bezpieczeństwa na hakach
- Szeroki zakres podwieszek w celu zaspokojenia różnych potrzeb klientów

Model	Numer produktu
Dwupunktowy wieszak	Proszę kontaktować się z firmą Ergolet
Trzypunktowy wieszak	Proszę kontaktować się z firmą Ergolet
Czteropunktowy wieszak	Proszę kontaktować się z firmą Ergolet
Prosty wieszak	Proszę kontaktować się z firmą Ergolet
Wieszak do bagnetu	Proszę kontaktować się z firmą Ergolet
Wieszak do pasa	Proszę kontaktować się z firmą Ergolet
Dostępne różne modele	Proszę kontaktować się z firmą Ergolet

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość	360/480/580 mm
Wysokość	165 mm
Średnica	ø38 mm

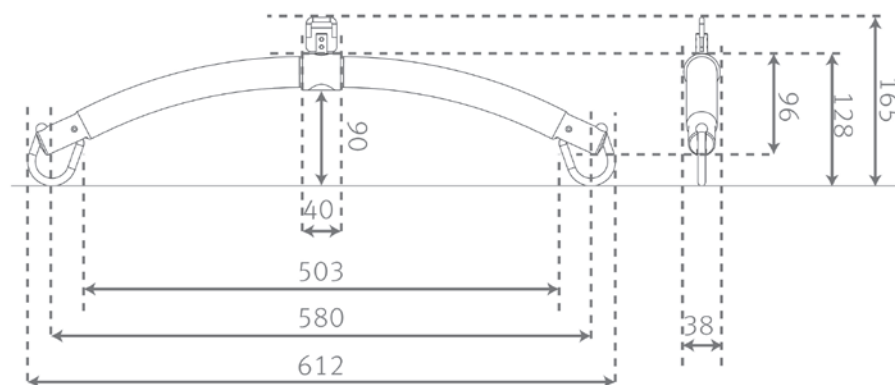

Rysunek odnosi się do standardowego dwupunktowego wieszaka 580 mm.

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach.

Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608
E-mail: daf@ergolet.pl
www.ergolet.com





We lift the world.

Polska centralna

Dariusz Felisiak
Sales Manager
E-mail: daf@ergolet.pl
Tel: 506 303 608

Polska północna

Przemysław Duda
Key Account Manager
E-mail: prd@ergolet.pl
Tel: 518 334 621

Polska południowa

Krzysztof Dudek
Key Account Manager
E-mail: krd@ergolet.pl
Tel: 518 334 647

Biuro w Łodzi

Monika Mołęda
E-mail: mml@ergolet.pl
Tel.: 500 036 279

www.ergolet.com

Oddział główny w Danii: Ergolet • Taarnborgvej 12C • 4220 Korsoer • Denmark

Produkcja: Ergolet Polska sp. z o.o. • Lubska 17 • 68 - 320 Jasień